

CryoPen[®]



Reinventing Cryosurgery





HOCHMODERNE KRYOCHIRURGIE

CryoPen umfasst eine Reihe innovativer, leistungsstarker, freihändig geführter Kryochirurgiegeräte, mit denen sich alle gutartigen Hautläsionen schnell und kostengünstig vollständig entfernen lassen. Die Behandlung ist sehr schnell und kann leicht in die tägliche Praxis integriert werden.

Der CryoPen emittiert einen Mikrostrahl aus Distickstoffmonoxid (N₂O) unter hohem Druck (50-55 bar), der im Gewebe eine Temperatur von -89°C erzeugt und eine vollständige Gewebsnekrose in Sekundenschnelle bewirkt.

Keine Schmerzen, kein Aufwand, keine Nachsorge

Die CryoPen-Behandlung verursacht keine Schmerzen, keine Schädigung von gesundem Gewebe und wenig oder keine Narbenbildung. Und sie erfordert nur minimale Pflege nach der Behandlung.

Einfache Handhabung

Wenn Sie keine Erfahrung mit der Kryochirurgie haben, brauchen Sie nur Ihre diagnostischen Fähigkeiten und eine ruhige Hand. Wenn Sie bereits Erfahrung mit herkömmlichen kryochirurgischen Instrumenten haben, werden Sie von der aussergewöhnlichen Leistung, der millimetergenauen Präzision und der einfachen Handhabung des CryoPen begeistert sein!



SEE



THE CRYOPEN IN ACTION !

Behandlung aller gutartigen Hautveränderungen

Behandlung häufiger Krankheitsbilder
in nur wenigen Sekunden:
Akrochordon, aktinische Keratose
und Cheilitis, kapillares Hämangiom,
kutane Leishmaniose, diskoider
Lupus erythematoses, fadenförmige,
flache, vulgäre, plantare und
anogenitale Warzen, Rosazea,
Lichen sclerosus, Granuloma
annulare, Molluscum contagiosum,
seborrhoische Keratose und virale
Läsionen.

Einfach zu bedienen

Jeder CryoPen wird mit einem
Sortiment an Applikatoren geliefert.
Zusätzliche Kartuschen können
bestellt werden. Kartuschen haben
eine Haltbarkeit von 2 Jahren und
können bei Raumtemperatur gelagert
werden.



PERFEKTE ENTFERNUNG VON HAUTLÄSIONEN

CryoPen liefert aussergewöhnliche Ergebnisse bei der vollständigen Entfernung aller gutartigen Hautläsionen in nur einer Sitzung.



Acrochordon

Behandlung:
10-15 Sek.



Hautanhängsel

Behandlung:
5-10 Sek.



Pigmentfleck

Behandlung:
3-5 Sek.



Sonnenschaden

Behandlung:
3-5 Sek.




Molluscum contagiosum

Behandlung:
10-15 Sek.



Hämangiom

Behandlung:
5-10 Sek.

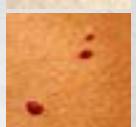

Seborrhoische Keratose

Behandlung:
5-10 Sek.



Warze

Behandlung:
10-15 Sek.



WÄHLEN SIE DEN FÜR SIE PASSENDEN CRYOPEN

Die CryoPen-Serie umfasst eine Reihe von Kryochirurgiegeräten in Stiftform, Applikatoren und Kartuschen um die Bedürfnisse jeder Behandler:in abzudecken.

Die Wahl des Geräts hängt von Ihrer Nutzung ab.

Wir werden Sie gerne beraten.



CryoPen® M

Geeignet für weniger häufige Anwendung oder für kleinere/ oberflächliche Läsionen.
Für 8g N₂O-Kartuschen geeignet.

- 1-3mm Applikator |
- 2-6mm Applikator ||

CryoPen® X+

Geeignet für intensiven und vielseitigen Gebrauch.
Erhältlich in 2 Grössen, für 8g oder 16g N₂O-Kartuschen.

- 1-3mm Applikator |
- 2-6mm Applikator ||
- 4-8mm Applikator |||
- 7-20mm Applikator ||||
- 1-3mm long Applikator |
- 2-6mm long Applikator ||

CryoPen® B+

Geeignet für häufigen Gebrauch oder für grössere/ tiefere Läsionen.
Für 23,5 g N₂O-Kartuschen geeignet.

- 1-4mm Applikator |
- 2-6mm Applikator ||
- 4-8mm Applikator |||



Kartuschen

8g N₂O

1 Box enthält 24 Kartuschen,
1 Karton enthält 12 Boxen.

16g N₂O

1 Box enthält 6 Kartuschen,
1 Karton enthält 12 Boxen.



CryoPen® o+

Geeignet als Allzweck-Kryochirurgiegerät für den regelmässigen Gebrauch. Erhältlich in 2 Grössen, für 8g oder 16g N₂O-Kartuschen.

- 1-3mm Applikator |
- 2-6mm Applikator ||
- 4-8mm Applikator |||
- 7-20mm Applikator ||||

CryoPen® XP

Geeignet für intensiven und vielseitigen Gebrauch. Erhältlich in 2 Grössen, für 8g oder 16g N₂O-Kartuschen.

- 1-3mm Applikator |
- 2-4mm Applikator ||
- 3-5mm Applikator |||
- 5-8mm Applikator ||||

23.5g N₂O

1 Box enthält 6 Kartuschen,
1 Karton enthält 12 Boxen.

5
JAHRE
GARANTIE
2 Jahre für Applikatoren!



MANUFACTURED BY



H&O EQUIPMENTS

Reinventing Cryosurgery

USA Office

115 Fairchild St, Suite 370,
Charleston, SC 29492
USA

Phone : +1 888-248-2838
cryoprobe@ho-equipments.com

Operating hours
Monday – Friday
9:00–17:00 (GMT -4)

Head Office

Rue des Journaliers 1
7822 Ghislenghien
Belgium

Phone : +32 68 26 86 00
info@ho-equipments.com

Operating hours
Monday – Friday
9:00–17:00 (GMT +2)

www.ho-equipments.com
info@ho-equipments.com

DISTRIBUTED BY



lasarmed
INNOVATING MEDICINE

www.lasarmed.ch
info@lasarmed.ch
+41 71 454 70 30