

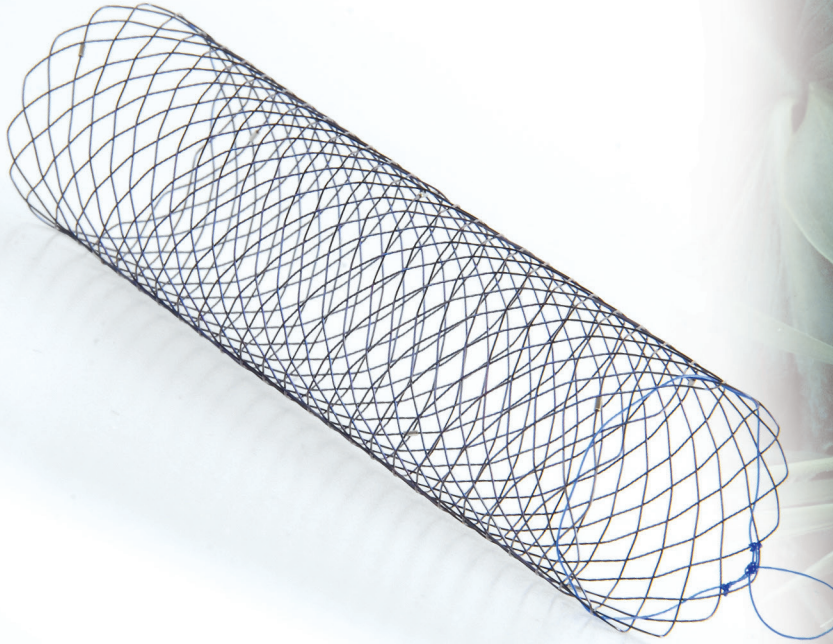


Enterella

SX-ELLA Stent Pyloroduodenal

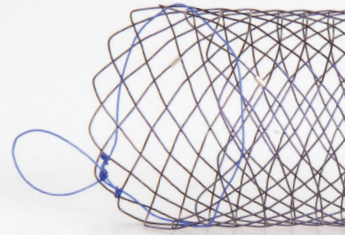

Enterella

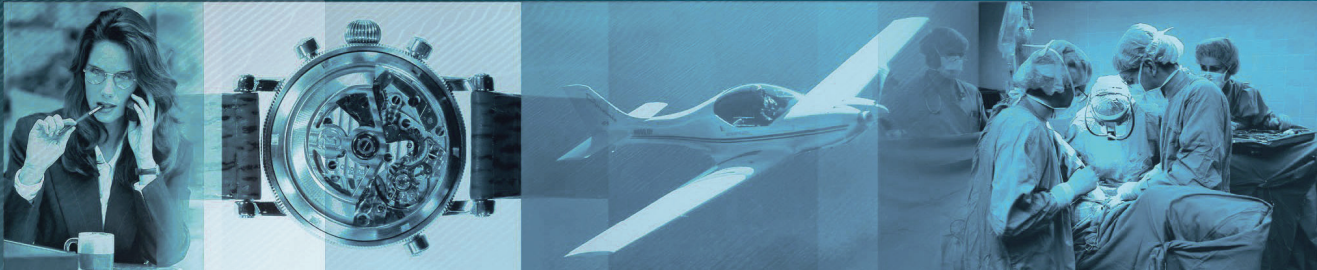

Einfache Anwendung

Exzellente Flexibilität

Atraumatische Stentenden

Genaue Anpassung an die anatomischen Kurven



SX-04-NJ-02/17/P/REV-0-02/2017

Beschreibung

SX-ELLA Stent Pyloroduodenal – Enterella

Stentsystem für fluoroskopische und/oder endoskopische Anwendung
Selbstexpandierbarer Nitinolstent vorgeladen auf dem PULL Einführsystem

Indikationen

Enterella Pyloroduodenal – indiziert für palliative Behandlung der Pylorusstrikturen oder von Duodenalstrikturen und/oder Obstruktionen, welche durch maligne Tumore verursacht werden.

Kontraindikationen

Enteralischämie
Darmperforation
Peritonealabszess
Ernsthafte Aszites
Ernsthafte Koagulopathie


Eigenschaften / Vorteile

- ☑ Atraumatische Stentenden / Effektive Prävention des Traumas der Gastrisch- oder Duodenalwand
- ☑ Exzellente Flexibilität / Genaue Anpassung an die anatomischen Kurven
- ☑ Röntgendichte Markierungen an beiden Stentenden und in der Mitte / Verbesserte Sichtbarkeit und richtige Platzierung des Stents
- ☑ Kunststoffschlinge am proximalen Stentende / Mögliche Repositionierung des Stents innerhalb von fünf Tagen nach der Anwendung
- ☑ Geflochtenes Einführsystem ist resistent gegen Knickstellen / Hervorragende System- und Stentanwendung

Zusätzliche Informationen


Das Einführsystem hat einen Durchmesser von 10,5 F (3,5 mm) und ist in der Standardlänge von 210 cm verfügbar; dieser Durchmesser erlaubt die Anwendung durch den Arbeitskanal des Endoskops
Röntgendichte, atraumatische Olivenspitze des Einführsystems
Empfohlener Führungsdraht: 0,035" (0,89 mm)

Einführsystem ist resistent gegen Knickstellen

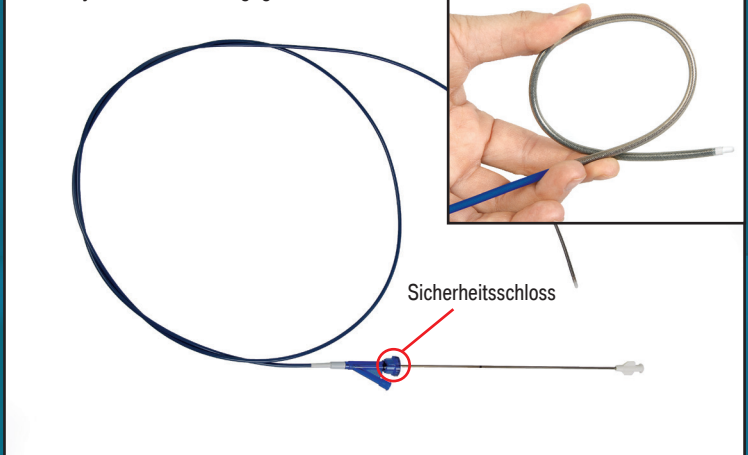


Sicherheitsschloss


Gelbe Visuellmarkierung und röntgendichter Ring

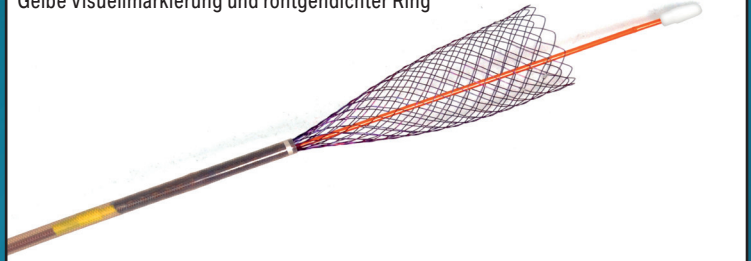


Röntgendichte Markierungen

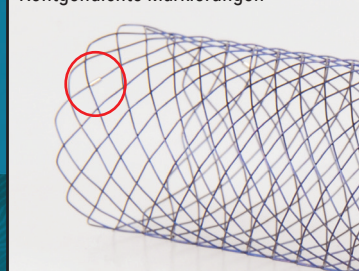


Kunststoffschlinge

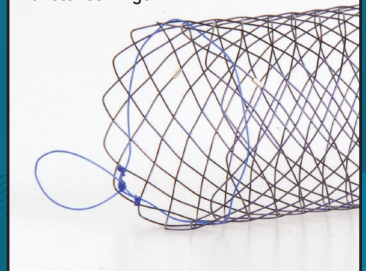

Atraumatische Stentenden

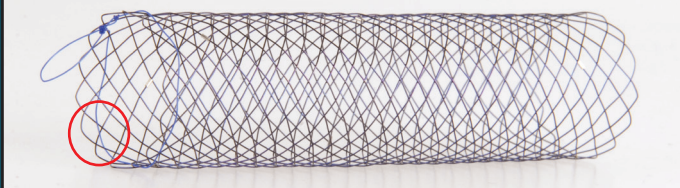

Einfache Anwendung

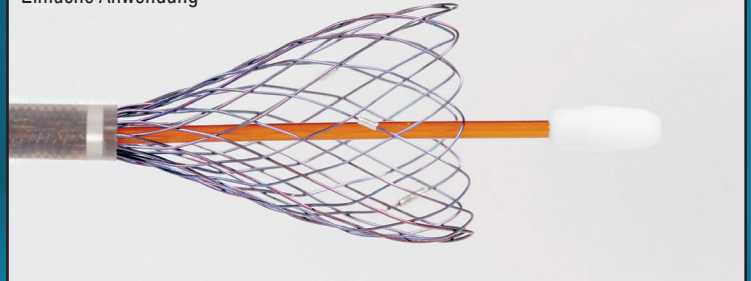

Verfügbare Größen

REF Nr.	Nominal (ungezwungen) Durchmesser [mm]	Nominale (ungezwungene) Stentlänge [mm]
019-04-20-082	20	82
019-04-20-090	20	90
019-04-20-113	20	113
019-04-20-135	20	135
019-04-22-082	22	82
019-04-22-090	22	90
019-04-22-113	22	113
019-04-22-135	22	135
019-04-25-082	25	82
019-04-25-090	25	90
019-04-25-113	25	113
019-04-25-135	25	135

Distributor:

Hersteller:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes
500 06 Hradec Kralove, Tschechische Republik

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu